

MixStar- eMotion

Très Grande Vitesse.



 DMG




MixStar eMotion

Très Grande Vitesse.

Nouveau



*Appréciations du précédent modèle

Mélange entièrement automatique avec une perfection électronique.

Le mélange n'a jamais été aussi facile, aussi rapide et aussi sûr : avec la nouvelle MixStar-eMotion DMG présente la dernière génération de mélangeur entièrement automatique pour les matériaux d'empreintes.

Cet équipement de haute technologie est extrêmement facile à piloter.

La MixStar-eMotion se manœuvre d'une seule main en appuyant sur un bouton poussoir rendant impossible tout dosage incorrect. De plus, son élégant design ne laisse pas indifférent.

Polyvalence comprise.

Quels que soient le matériaux d'empreinte et la technique choisies :

La MixStar-eMotion procure une réelle assistance pour tous les actes de la pratique quotidienne. Pour une utilisation entièrement automatique, DMG propose une gamme complète de matériaux d'empreinte de très haute qualité. Enfin, la machine est compatible avec toutes les cartouches et les containers souples du commerce.

Caractéristiques	Avantages
Entièrement automatique	Très facile à utiliser Se manœuvre sans les mains
3 vitesses d'extrusion	Extrêmement rapide, gain de temps Adapté à tous les besoins du cabinet dentaire
2 minuteries pour le temps de travail et le temps de prise	Pas d'erreur de procédure
Qualité du matériau toujours homogène et exempt de bulles	Dosage optimal Ratio de mélange parfait
Port USB pour la mise à jour du programme	Optimisé en permanence



Cartouches MixStar Honigum et StatusBlue pour un mélange dynamique dans la machine MixStar-eMotion



Remplissage de la seringue à la vitesse numéro 1



Remplissage rapide du porte-empreinte aux niveaux de vitesses 2 et 3 Port

Qualité parfaite quelle que soit l'indication.

Honigum : une gamme complète pour la plus haute précision

Généralement, les matériaux d'empreinte sont soit particulièrement fluides soit stables. Honigum, par contre réunit ces deux caractéristiques opposées. Grâce à sa matrice rhéologique active, brevet DMG déposé, Honigum donne de meilleurs résultats sur ces deux plans. C'est pour cette raison et également pour d'autres avantages qu'Honigum a obtenu la meilleure note des 50 vinylpolysiloxanes testés par le « Dental Advisor ». De plus, les excellentes qualités d'enregistrement d'Honigum-Heavy ont amené le prestigieux Branemark Center à le recommander pour les prises d'empreintes implantaires. Avec le nouveau Honigum-Putty, DMG propose le premier véritable putty en mélange automatique en cartouche MixStar.

*The dental Advisor , Vol. 23, N° 3

StatusBlue: Le VPS pour toutes les indications des alginates

La stabilité du matériau conservé permet aussi des coulées multiples. Des empreintes répétées ou multiples, en raison de prothèses transitoires fracturées par exemple, deviennent inutiles. Dans une étude comparative sur « les alginates et les substituts des alginates » menée par l'organisme d'études américain « The Dental Advisor », StatusBlue a obtenu la note la plus élevée de tous les matériaux.*


*The dental Advisor, Vol. 24, N) 2, p. 2-7

A côté de StatusBlue et d'Honigum, Silagum-MixStar Putty Soft qui a fait ses preuves et a été largement testé peut également être utilisé dans la machine MixStar-eMotion.

Les cartouches optimisées MixStar permettent de reconnaître rapidement le produit par son codage couleur. En plus, les étiquettes indiquent les temps de travail et de prise respectifs pour un choix plus rapide et pour éviter toute erreur.



Le codage-couleur des systèmes de fermeture et les inscriptions indiquent les temps de travail et les temps de prise respectifs

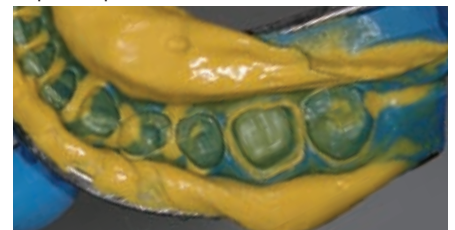

La reproduction des détails de l'empreinte avec Honigum-MixStar Putty et Honigum-Light



Prise d'empreinte de transfert avec Honigum-Heavy



Empreinte de situation précise avec StatusBlue

MixStar-eMotion DMG:

La technologie de pointe en matière de mélange automatique.

Plus facile.

La MixStar-eMotion est extrêmement facile à piloter. Une pression rapide sur le bouton-poussoir et le matériau est immédiatement dosé avec la plus grande précision, mélangé et extrudé. Comparée aux autres machines disponibles sur le marché, l'interrupteur de mise en route ne doit pas être maintenu pendant le processus de mélange et d'extrusion ce qui libère les mains et permet un travail plus détendu. Autre avantage, la machine bénéficie de deux minuteries pour le temps de travail et le temps de prise ce qui permet de les programmer et de retenir les temps respectifs des différents matériaux de prise d'empreinte.

Plus vite.

La MixStar-eMotion est le seul mélangeur équipé de trois vitesses, le niveau de vitesse le plus rapide permettant de délivrer le matériau deux fois plus vite qu'avec le précédent modèle de MixStar. Pour charger le porte-empreinte par exemple, vous pouvez gagner jusqu'à 20 secondes, ce qui augmente d'autant le temps de travail du matériau. Les différentes vitesses ont été déterminées pour optimiser les processus de prise d'empreinte. Que vous chargiez des seringues ou des porte-empreintes, que vous bénéficiiez d'une assistante expérimentée ou débutante, la MixStar-eMotion détermine le temps exact nécessaire à chaque indication.

Fiable.

La MixStar-eMotion procure une qualité de matériau toujours homogène et sans bulles grâce à sa régulation électronique. Le matériau arrive dans le porte-empreinte ou la seringue avec toujours le dosage optimal et vous pouvez être certain que vous travaillerez de façon économique car le gaspillage de produit sera réduit au maximum. En programmant exactement les temps de travail et de prise pour le mélange de chaque produit en particulier, les erreurs d'enregistrement pourront être évitées. Les cartouches MixStar DMG indiquent les temps respectifs pour prévenir tout risque d'erreur de procédure.



Ecran avec deux minuteries et trois niveaux de vitesse



Commande pour le changement rapide de cartouche



Interrupteur marche-arrêt pour le mélange automatique



Connexion de la pédale pour la commande optionnelle au pied et le port USB pour la mise à jour du programme



Nouveau!

MixStar-eMotion

Conditionnement

1 MixStar-eMotion	
230 V int.	REF 900480
230 V GB	REF 900483
230 V NZ/AUS	REF 900484
115 V int.	REF 900482

Accessoires

50 MixStar-Tips	REF 909567
1 pédale	REF 900310



Nouveau!

Honigum-MixStar Putty

Conditionnement

1 Cartouche de 390 ml	
10 MixStar-Tips	REF 919374

Pack économique

5 Cartouches de 390 ml	
50 MixStar-Tips	REF 919375

Honigum-MixStar Heavy

Conditionnement

1 Cartouche de 390 ml	
10 MixStar-Tips	
Honigum-Heavy	REF 909537
Honigum-Heavy Fast	REF 909638

Pack économique

5 Cartouches de 390 ml	
50 MixStar-Tips	
Honigum-Heavy	REF 909538
Honigum-Heavy Fast	REF 909637

Honigum-Light

Conditionnement

4 Cartouches de 25 ml	
16 Automix-Tips, 16 Intraoral-Tips	
Honigum-Light	REF 909539
Honigum-Light Fast	REF 909639

2 Cartouches de 50 ml	
12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips	
Honigum-Light	REF 909831
Honigum-Light Fast	REF 909832

Pack économique

16 Cartouches de 25 ml	
50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips	
Honigum-Light	REF 909690
Honigum-Light Fast	REF 909691

8 Cartouches de 50 ml	
50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips	
Honigum-Light	REF 909835
Honigum-Light Fast	REF 909836



Honigum-MixStar Mono

Conditionnement

1 Cartouche de 390 ml	
10 MixStar-Tips	REF 909568

Pack économique

5 Cartouches de 390 ml	
50 MixStar-Tips	REF 909569



StatusBlue

Conditionnement

1 Cartouche de 390 ml	
10 MixStar-Tips	REF 909693

Pack économique

5 Cartouches de 390 ml	
50 MixStar-Tips	REF 909694

**Pour davantage d'informations,
consulter notre site
www.dmg-dental.com/mixstar**



Pour de plus amples informations, contacter votre représentant local: Laboratoires PRED
Tél.: 01.41.98.34.00 – www.pred.fr

DMG Un sourire d'avance.

Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49.(0)40.8 40 06-0 Fax: +49.(0)40.8 40 06-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com